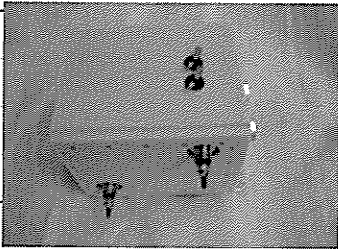


# 点検・修理報告書

管理 No. 20181015  
発行日： 2019 年 5 月 28 日

|       |                                                                                                   |                                                            |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| 機種/型式 | WD-150                                                                                            |                                                            |      |
| 作業年月日 | 2019 年 5 月 28 日                                                                                   | 作業時間：                                                      | 4 Hr |
| 顧客名   | てらさか歯科医院 様                                                                                        | TEL：                                                       |      |
| 所在地   | 愛媛県大洲市長浜甲405-3                                                                                    | ご担当                                                        | 様    |
| 販売店   |                                                                                                   | ご担当                                                        | 様    |
| 納入年月日 | 2015 年 2 月 10 日                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品  |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                                  | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |      |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |      |

|                                                                                                                                           |                                   |                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 装置情報                                                                                                                                      | 製造番号： 14070116                    | 運転回数：                                                                               |      |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                                                                           |                                   |                                                                                     |      |
| 乾燥時槽内低温異常 エラー4                                                                                                                            |                                   |                                                                                     |      |
| 原因                                                                                                                                        | ・サーモスタット2・3が作動していない為<br>・SSRの作動不良 |  | 交換部品 |
| 処置、作業内容                                                                                                                                   |                                   |                                                                                     |      |
| <p>・乾燥ヒーターの温度をサーモスタットが作動していないことを検証しました。</p> <p>よってヒーターAssyを注文をし交換して修理いたします。</p> <p>・SSRはヒーターを電氣的に制御している部品です。この部品も破損している可能性もあるので交換します。</p> |                                   |                                                                                     |      |
| 特記事項 上記の部品を交換で修理したいと思います。ので作業時間を約4時間みています。その時間を超えるようでしたら代替えきを入れ替えさせていただきます                                                                |                                   |                                                                                     |      |

|   | 交換部品名称    | 部品コード                                                              | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 1 | ヒーターAssy  |                                                                    | 1      |    |    |
| 2 | SSR1/SSR2 |                                                                    | 2      |    |    |
| 3 |           |                                                                    |        |    |    |
| 4 |           |                                                                    |        |    |    |
| 5 |           |                                                                    |        |    |    |
| 6 |           |                                                                    |        |    |    |
| 7 |           |                                                                    |        |    |    |
|   |           | 1. 有償 <input checked="" type="radio"/> 2. 無償 <input type="radio"/> | 部品代 合計 |    |    |
|   |           |                                                                    | 技 術 料  |    |    |
|   |           |                                                                    | 出 張 料  |    |    |
|   |           |                                                                    |        |    |    |
|   |           |                                                                    | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄


- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 28 日

ご署名 寺 政 弘 司 

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030
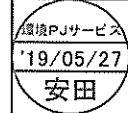
|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |
| 19/05/28 富田                                                                           | 19/05/27 安田                                                                           |