

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-28455

No. 111228

納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	ONW-10
所在地	神奈川県川崎市多摩区登戸 2708-1		機番	000370
ユーザー名	向ヶ丘久保田内科 様（定期メンテナンス契約）		納入日	平成 16 年 2 月 12 日
点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成 23 年 11 月 29 日
返送先	納入先と同じ		発送日	平成 23 年 12 月 23 日

修理依頼・異常内容

- ・漏電ブレーカ切れ（ブレーカトリップ）
- ・定期点検

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）



機械内部の電気部品に水が掛かった形跡があり、これが原因で漏電ブレーカがトリップしたものとされます。（写真をご参照ください）
水漏れ箇所の対策を実施後、絶縁抵抗を測定して正常を確認しました。

写真1：蛍光灯ASSY

写真2：交換部品一式

（原因）水槽とカバーの隙間から水が漏れて
蛍光灯にかかった。

（対策）隙間にシール剤を充填

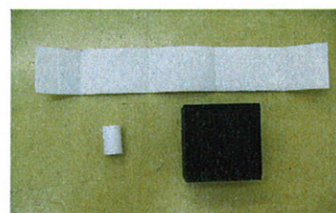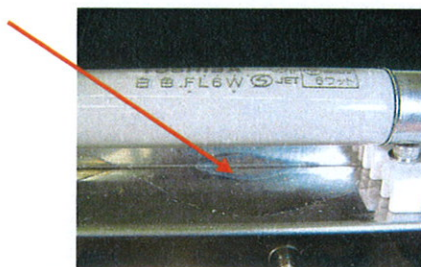

[2] 修理・点検内容

1. 漏電不具合修理および対策
2. 絶縁抵抗測定：電源コード及び機械本体 2000MΩ 以上・・・正常
3. 定期点検および部品交換
4. オゾン水濃度測定：0.49～0.41 mg/L・・・正常
5. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.4% 酸素流量：0.76L/min 圧力：0.117～0.202MPa
6. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品コード	部品名称	数量	備考
	定期交換部品 ドレンフィルター、オゾン分解触媒	1 式	

承認

江
2312.28
口

審査

江
2312.28
口

作成

H23. 12. 28

中澤