

株式会社IHIアグリテック

機械事業本部 営業サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030


クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称	うりた歯科医院 様	製造番号	100282	ご確認	瓜田 雄一郎
	住所	川口市安行藤ハ456	納入検査実施日	2017年11月15日		
			納入検査実施者	エムシーサービス(株) 屋住		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレイのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無い		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓			✓	装置内運転時異音

特記事項

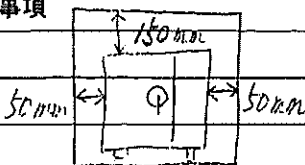

※ 使用時はカウジー内へ引き出し 様子です。