

吉田クリニック(山武市) ONW使用状況確認 2015 4/2作業時撮影




↑
全体写真

給水は井戸水なので給水フィルターを設置
誰が設置したかは不明。



↑
洗浄層にはカビ多少
あるが、排水ホース・内部配管にはカビなし


■ユーザーでいままで使用していた給水フィルター(水圧メーター付)ADVANTEC BR-251Pというもの。
フィルター容器とキャップの接点より水漏れあり。

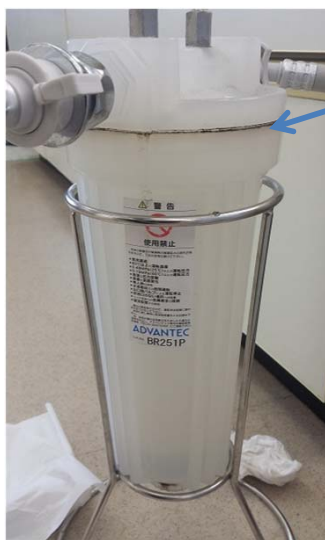

■ スコープとコネクター情報。



副送水口あり。

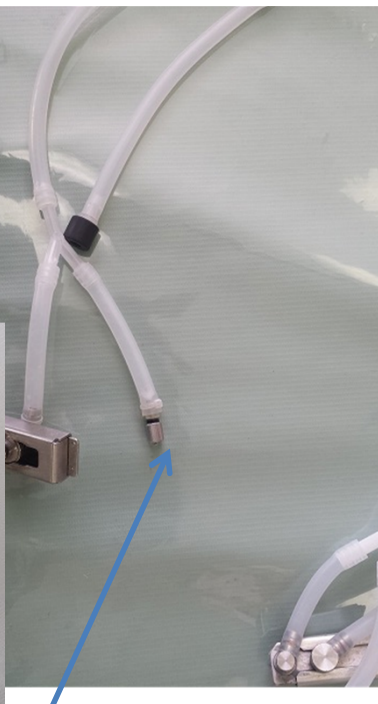

副送水コネクター付



↑ チューブは2種類用意してあった。
一個は副送水コネクター付用
一個は通常用。

↓ 結局新鋭の糸巻きフィルターを給水側に設置(有償)



↑ 旧 フィルターの仕様。



↑ 交換したフィルターの仕様。

現場の水圧は高め
通常0.4MPa
他蛇口を使用により0.6付近まで上がる
新鋭のフィルターの最大耐圧は0.5MPa
(ADVANTECは0.49MPaまで)