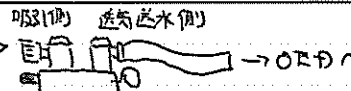


保守点検・修理 報告書

管理 No. 20170214
発行日：平成 29 年 2 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300484
作業年月日	平成 29 年 2 月 14 日		作業時間： Hr
顧客名	宮本内科医院 様		TEL： 0475-22-3770
所在地	千葉県茂原市緑ヶ丘4-3-3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 27 年 2 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
H29年 保守点検			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッ数 725
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ 内止プラグ取り付け ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項			
コシファイルコネクタ用 内止プラグで取り付けました。 			

装置 情報	交換後運転回数： 791	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 714	殺菌/消毒+714： 833
	リークチェック： 0	自己洗浄： 449	アルコール単独： 2	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ; 水槽側		☒	1
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ; チューブ側		☒	1
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	H29 年 2 月 14 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	宮本内科医院 宮本昭彦 印
ご署名	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者