


鷺沼診療所 OED定期メンテナンス作業時の画面
2017 09/19訪問

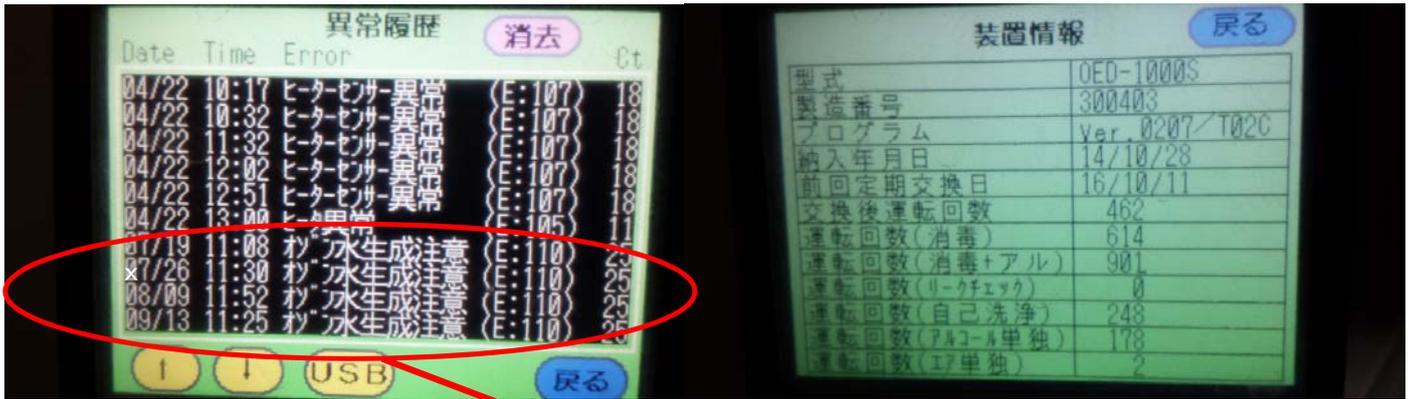

7/19 7/26 8/9 9/13とオゾン水生成異常発生。今回これを受けて、この対応とメンテ作業を同時にする為訪問。ユーザーでスコープ以外は消毒していないということを書いており、残りは洗浄時のすすぎ不足か給水環境(温度と汚れ)が関係していることを院長に説明している。異常が連続して出る場合、給水フィルターを置いて設置してもらうことも検討頂くようお願いした。

その前にある度重なるヒーター異常は操作基盤不良によるもので、4/22頃にIHI 中澤様にて交換済み。