

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210922

発行日：2021年 9 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ■		製造番号： 301543
作業年月日	令和 3 年 9 月 6 日		作業時間： Hr
顧客名	さいたま新開橋クリニック 様		TEL： 048-795-4760
所在地	埼玉県さいたま市西区宮前408-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018年 10 月 19 日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>	
引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input checked="" type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容	定期保守点検およびオーバーホール依頼																																																
不具合原因、作業内容	定期交換交換部品を含めてオーバーホールを実施いたしました。																																																
点検項目	<table border="1"> <tr> <td>フタロック</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>殺菌槽 LED</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>酸素ライン</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>エアライン</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>アルコールライン</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>オゾン水濃度計動作</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 922</td> </tr> <tr> <td>オゾンセンサ</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>排水栓、排水ライン</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>給水ライン</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>細管送水ライン</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>濃度計流量</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>排気ライン</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>水位センサー</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>オゾン濃度</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm</td> </tr> <tr> <td>水漏れ確認</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>異常音、振動</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>清掃</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>電源コード</td> <td>正常 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>トレー</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>殺菌チューブ類</td> <td>正常 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>殺菌槽コネクタ</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>マニホールド周辺チューブ</td> <td>正常 <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 922	オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm	水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input type="checkbox"/>	トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input type="checkbox"/>	殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>																																														
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>																																														
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 922																																														
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>																																														
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>																																														
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>																																														
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.67 ppm																																														
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>																																														
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input type="checkbox"/>																																														
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input type="checkbox"/>																																														
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	マニホールド周辺チューブ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>																																														
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>																																														
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	異常ありませんでした。																																																

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施 ・ 未実施	殺菌/消毒：	11397	殺菌/消毒+アル：	2513	
	リークチェック：	0	自己洗浄：	805	アルコール単独：	2	エア単独：


交換部品名称	見積部品No	交換	数量	交換部品名称	見積部品No	交換	数量
定期交換部品	1	<input type="checkbox"/>	1 式	酸素、給水電磁弁	8~9	<input type="checkbox"/>	1 式
メインポンプ、排水ポンプ	2~3	<input type="checkbox"/>	1 式	アルコールライン電磁弁	10	<input type="checkbox"/>	1 式
エアポンプ	4	<input type="checkbox"/>	1 式	配管パッキン、フタパッキン	11	<input type="checkbox"/>	1 式
排気ファン	5	<input type="checkbox"/>	1 台	24V電源、コントロール基板	12~13	<input type="checkbox"/>	1 台
ドレンバルブ ASSY	6	<input type="checkbox"/>	1 台	水槽	14	<input type="checkbox"/>	1 式
マニホールド 電磁弁	7	<input type="checkbox"/>	1 式	トレー ASSY	15	<input type="checkbox"/>	1 式

機械出荷日：2021年9月7日


修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
 TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
	宮宗


1: 定期交換部品

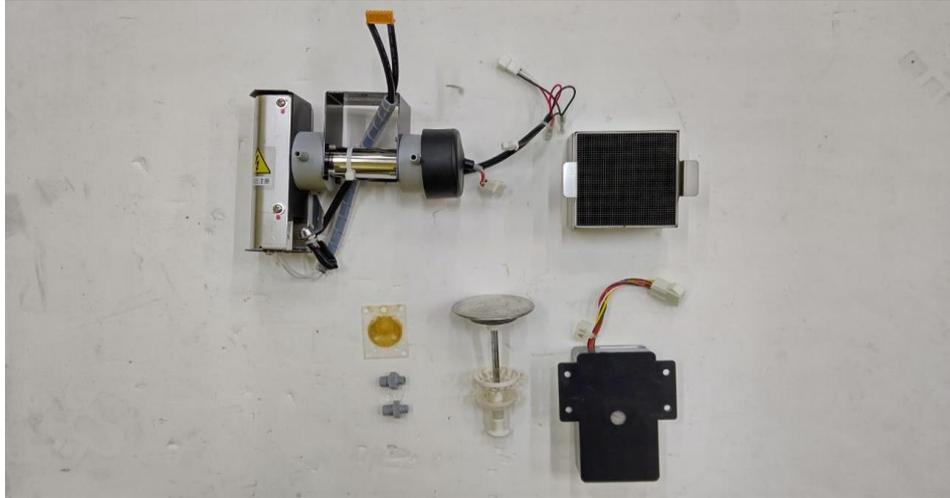

2: メインポンプ、排水ポンプ、エアポンプ、電磁弁(マニホールド、酸素、アルコール、給水)

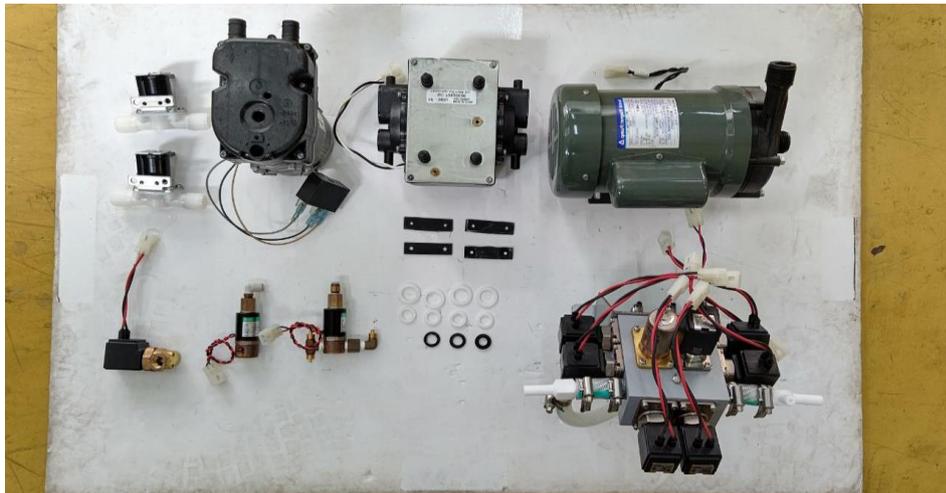

3: 排気ファン、24V電源、DCモータ、カム

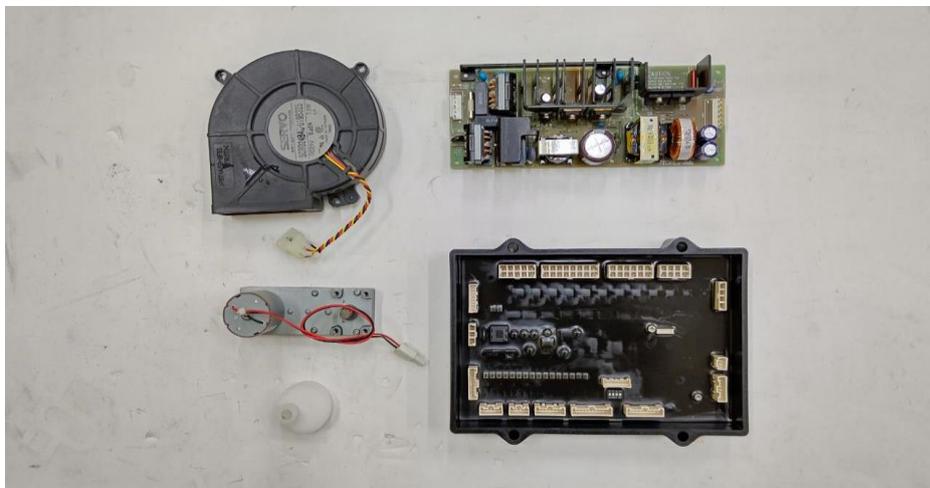

4:フタパッキン、配管チューブ



5:水槽



6:ドレンバルブASSY



※トレイASSYの写真はありません