

保守点検・修理 報告書

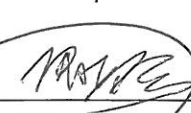
管理 No. _____
発行日 平成 27年 3月 25日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100737	
作業年月日	平成 27年 3月 25日		作業時間	:	Hr
顧客名	津田クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	和歌山県紀の川市桃山町神田156		電話番号	:	0736-66-3111
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 3月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 494
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	プログラムVer	正常	☒ 0107 / TOL A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 105 回	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 105 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 4 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.12030946 → NO.10070330
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.111018-005 → NO.110630-009
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山