

保守点検・修理 報告書

管理 No.

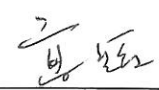
発行日 平成 28年 4月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300530
作業年月日	平成 28年 4月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	たかあきクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市下京区中堂寺坊城町31-7 ｽﾏｰﾄﾃﾞﾝﾎﾞｸ1階		電話番号	: 075-822-8221
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 28年 4月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検ｼｰﾙ記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 5/3
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0205/T02C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 346 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒: 119 回	消毒+ﾌﾙ: 227 回
	リークチェック: 310 回	自己洗浄: 16 回	ﾌﾙｺｰﾙ単独: 4 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13101586 → NO.13091526
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.131203-004 → NO.120912-023
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、ｺﾈｸﾀ継手、
		☐		排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山