

オゾン水濃度測定報告書

管理 No. 20190401

発行日 平成 30年 4月 1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100055
作業年月日	平成31年 3月 27日	作業時間:	1.5 Hr
顧客名	大塚医院 御中	TEL:	075-881-3088
所在地	京都府京都市右京区梅津前田町65-4		
納入年月日	平成22年 7月 7日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	前回点検日: 平成30年10月23日

1: 測定方法

オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000に搭載されているオゾン水濃度計 (No. 51809065) につきまして基準器と比較しながら測定します。

2: 基準器

荏原実業株式会社製 オゾンモニタ 型式 PL620A 製造番号6060184

3: 測定条件およびデータ

運転モード: 殺菌 水槽内容物: トレー

実測時間 (分)	タッチパネル 表示時間 分 (参考)	1回目: 11時49分		2回目: 12時5分	
		OED-1000	基準器	OED-1000	基準器
0.0	10	0.00	0.00	0.00	0.01
0.5	10	0.31	0.26	0.36	0.25
1.0	9	0.76	0.74	0.77	0.73
1.5	9	0.72	0.73	0.72	0.73
2.0	8	0.66	0.66	0.66	0.68
2.5	8	0.74	0.67	0.64	0.62
3.0	7	0.74	0.75	0.76	0.78
3.5	7	0.68	0.68	0.72	0.73
4.0	6	0.61	0.63	0.66	0.67
4.5	6	0.76	0.77	0.62	0.62
5.0	5	0.71	0.71	0.77	0.78
5.5	5	0.64	0.65	0.72	0.73
6.0	4	-	0.75	-	0.66
計測器の平均値		0.70	0.70	0.70	0.71
タッチパネルの殺菌履歴		0.70		0.71	

単位 (ppm)

4: 測定結果

基準器に対してタッチパネルの殺菌履歴濃度が0.7±0.2ppm以内であること。

測定1回目: 基準器 0.70ppm タッチパネルの殺菌履歴 0.70ppm・・・合格

測定2回目: 基準器 0.71ppm タッチパネルの殺菌履歴 0.71ppm・・・合格

修理業者 株式会社 IH アグリテック 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528



承認	作業者
若 19.4.1 井	中 19.4.1 澤

オゾン水濃度測定 工事写真

撮影日:平成31年3月27日
撮影場所:大塚医院様 (京都府京都市)

写真1:計測状況全景



写真2:基準器拡大



写真3:タッチパネル拡大

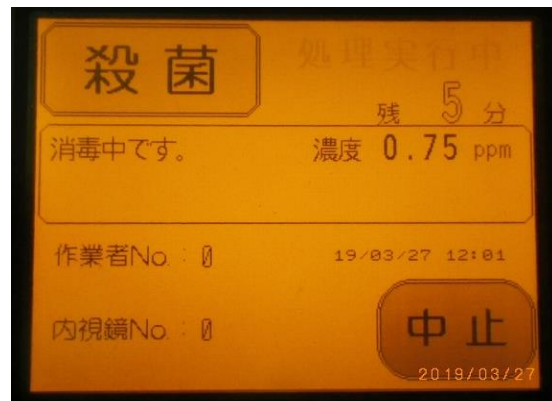


写真4:タッチパネル「装置情報」

装置情報		戻る
型式	OED-1000	
製造番号	100055	
プログラム	Ver. 0107/T01.A	
納入年月日	10/07/07	
前回定期交換日	18/10/23	
交換後運転回数	62	
運転回数(殺菌)	33	
運転回数(殺菌+アル)	1316	
運転回数(リークチェック)	2	
運転回数(自己洗浄)	1460	
運転回数(アルコール単独)	0	
運転回数(エア単独)	0	

2019/03/27

写真5:タッチパネル「殺菌履歴」

消去

殺菌履歴

戻る

Date	Time	オゾン 濃度	作業 者No.	スコア* No.	mode
03/13	09:31	0.71	0	0	1
03/16	09:34	0.73	0	0	1
03/18	09:25	0.73	0	0	1
03/26	09:46	0.74	0	0	1
03/27	11:49	0.70	0	0	0
03/27	12:05	0.71	0	0	0

最新

↑

↓

印刷

USB

2019/03/27



証明書番号 EJ810020
(Certificate No.)

校正証明書

(Calibration Certificate)

株式会社IHIアグリテック 御中
(Customer name)

荏原実業株式会社 計測器・医療本部
〒215-0033 神奈川県川崎市麻生区栗木2-3-12

Ebara Jitsugyo Co. Ltd.
Measuring Instrument and Medical Division
2-3-12 Kurigi, Asao-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa, 215-0033 JAPAN

名称 オゾンモニタ
(Product name) Ozone Monitor

型式 PL-620A
(Model)

製造番号 6060184
(Serial No.)

校正実施月日 2019/2/7
(Calibration date)

上記測定器は、当社のオゾンモニタ基準器と比較
校正したことを証明致します。

We hereby certify that the above mentioned equipment was calibrated
in comparison with our ozone monitor standard.

使用基準器
(Standard used)

型 式 EL-2001S
(Model)

基準器管理番号 EK010A0
(Control No. of standard)