

修理報告書 (引取り修理)

修理依頼番号

No. 210419

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 福岡支店 殿		機種	OED-1000S
客先	顧客名	児嶋病院様		機番	300978
環営	所在地	福岡県飯塚市花瀬 87-1		納入日	2016年08月18日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	2021年02月22日
	返送先	納入先と同じ		出荷日	2021年04月05日
計					


修理依頼・不具合内容

各部点検

不具合原因 (故障箇所) と処置

[1] 点検結果 (不具合箇所と不具合原因)

- ・オゾンガス発生～オゾン水製造～内視鏡への送水、送気ライン・・・異常ありませんでした
- ・オゾン水濃度制御ライン・・・・・・・・異常ありませんでした
- ・オゾン水濃度データ・・・ 2020年1月から2021年2月まで188回運転しましたが 0.5～0.9ppmの規定範囲内で問題ありませんでした

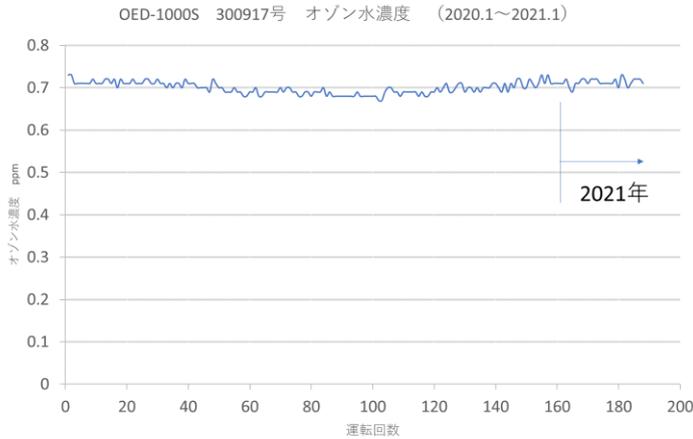

[2] 修理・点検内容

- 1: 点検部品・・・オゾン発生装置、オゾン水濃度計、エアポンプ、メインポンプ
- 2: オゾン水濃度測定 (規定値 0.7 ± 0.2 ppm) : 0.70 ppm・・・正常
- 3: 出荷時の装置情報

交換後運転回数 87 殺菌 : 199、殺菌+アルコール : 485、リークチェック : 1

自己洗浄 : 246、アルコール単独 : 0、エア単独 : 1

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1	アルコールタンクキャップ	1個	

承認	松永
責任技術者	中澤
作成	R03.4.19 中澤