

保守点検・修理 報告書

管理 No.

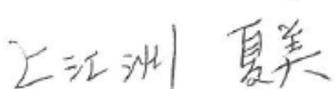
発行日 平成 24 年 5 月 7 日

| | | | |
|-------|---|--|-------------------|
| 販売名 | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 | | 製造番号： 100033 |
| 作業年月日 | 平成 24年 5月 7日 | | 作業時間： 1 Hr |
| 顧客名 | たまきクリニック | | TEL： 098-926-1313 |
| 所在地 | 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭 8 3 7 - 8 | | 担当 様 |
| 販売店 | E-EMERICAL | | 担当 城間 様 |
| 納入年月日 | 平成22年 4月 日 | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品 |
| 作業区分 | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 | | | |
| 1/28 起動時給水異常 8/17 オゾン水生成異常 10/28 酸素圧力異常2 | | | |
| 不具合原因、作業内容 | | | |
| 点検項目 | | | |
| フタロック | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 酸素ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 653 |
| オゾンセンサ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 濃度計流量 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 水位センサー | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0,66 ppm |
| 水漏れ確認 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 清掃 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| トレー | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 殺菌槽コネクタ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | | 正常 <input type="checkbox"/> |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|---|------------|-------------|
| 装置 情報 | 交換後運転回数： 1111 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌： 604 | 殺菌+アル： 1085 |
| | リークチェック： 1050 | 自己洗浄： 392 | アルコール単独： 9 | エア単独： 0 |

| 交換部品名称 | 部品コード | 交換 | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換 | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン濃度計 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 吸盤 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 3 |
| オゾンセンサー | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |
| 分解触媒 | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |
| 排水フィルター | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | | | <input type="checkbox"/> | |
| 洗浄コネクタ | | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | | | <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|--|---------------|
| お客様ご確認署名欄 | | H24 年 5 月 7 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 | | |
| ご署名  | | 印 |

修理業者 株式会社 新鋭工業福岡 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL：098-876-4262

| | |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
| | 玉城 |