


点検・修理報告書

管理 No. 20190207
発行日: 2019 年 2 月 12 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 2 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	えびがせファミリー歯科 様		TEL:
所在地	新潟県新潟市東区海老ヶ瀬 3 0 0 8		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所		ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 23 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100031	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 槽内温度低下		
原因		
・ソリットスティートリレー (SSR) 故障		
処置、作業内容		
・交換前 7.8 ~ 11.0 A 安定していなかったが ・交換後 12.35 でヒターに電流が流れた時点で 12.35 A 安定した電流が流れ温度も上昇し始めた		
特記事項		

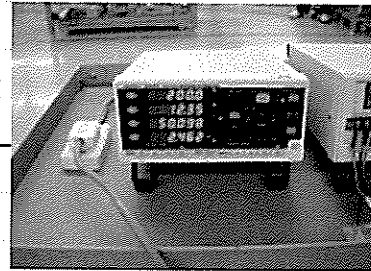

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ソリットスティートリレー (SSR)		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒950-0806 新潟県新潟市東区海老ヶ瀬3008
えびがせファミリー歯科
院長 西村 雄介
http://ebigase-dental.com/
ご署名 TEL 025-386-6074 FAX 025-385-6079

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/02/12 富田	環境PJサービス '19/02/12 安田