

点検確認書

異音対応

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 7月 13 日	機種名	ONW-10	製造機番	: 000644
設置場所	右側 No1 BC-007 1D5191-S0-003			TEL	: 0532-31-2167
設置時期	平成 年 月 日	運転回数	7929	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒	2回実施	
酸素発生	正常	☐	濃度:	% 流量: L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品		数量	コメント
水ポンプ P-1	交換 ☒	1	水ポンプの劣化で異音が発生したと思われる。 全てのポンプで交換しました。
〃 P-2	交換 ☒	1	
〃 P-3	交換 ☒	1	
別紙工事写真参照	交換 ☐		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

ご署名 鈴木 愛

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

成田記念病院 御中

別紙:ONW-10 644号 工事写真 (平成23年7月13日)

写真1:作業中全景


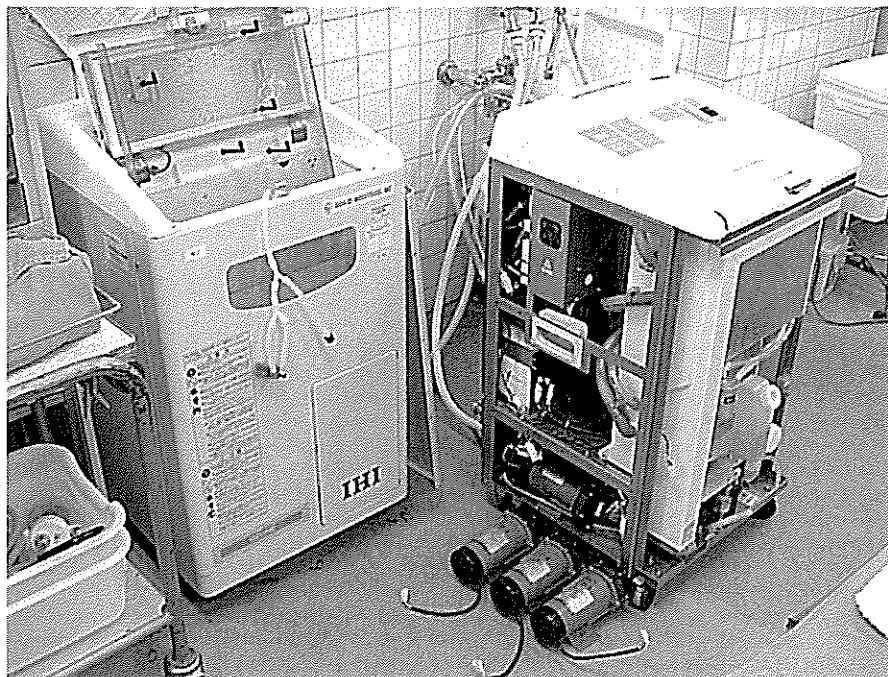


写真2:水ポンプ交換完了

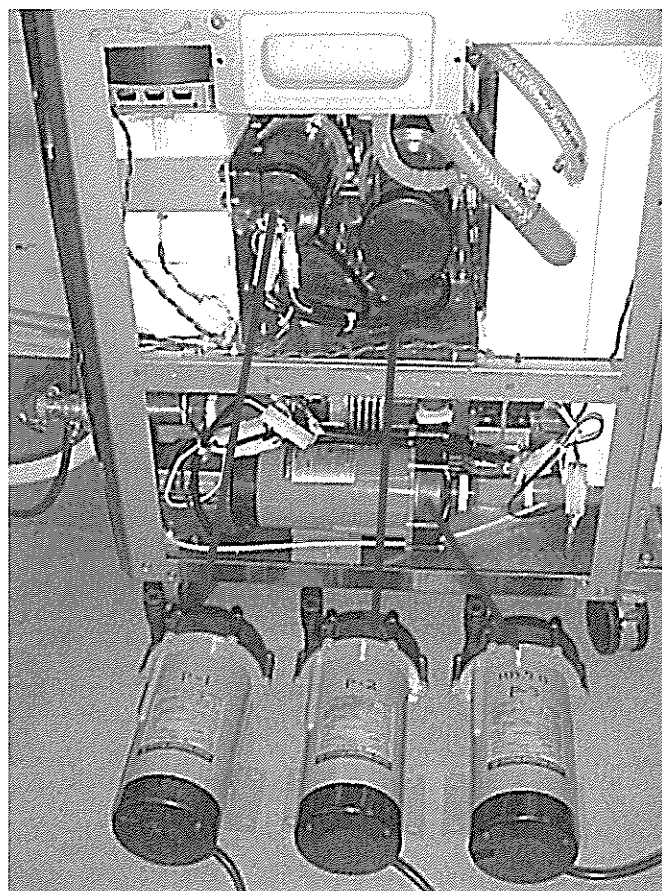

(株)IHIシバウラ