


ウォッシャーディスイنفエクター WD-150設置報告書

作業者用

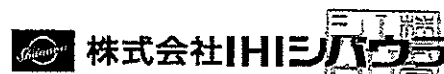

環境事業部 営業サービスグループ

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地170番6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

お客様	名称	はら 歯科 医院	製造番号	14080149	ご確認	
	住所	栃木県小山市西城角6-35-7	納入日	2015年5月14日		
	納入場所	1F	納入検査・会社・実務者	エムシーエス(株)大塚・行川		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
		ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
		SDソケットの反応・汚れ	良好 OK		
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考