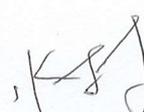


株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

| | | | | | |
|-----|----|--------------------------------|---------|------------------|--|
| お客様 | 名称 | 尾島デンタルクリニック 足利おとなこども歯科 矯正歯科 | 製造番号 | 100573 | ご確認  |
| | 住所 | 栃木県足利市堀込町本屋敷2474-1 | 納入日 | 2021/11/26 10 | |
| | | | 納入検査実施者 | 菅田、太田 | |

| 項目 | 判定 | 検査項目 | 項目 | 判定 | 検査項目 | |
|-------|----|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| ドア | ✓ | 開閉動作確認 | 外装・設置 | ✓ | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認 | |
| | ✓ | ドアパッキンキズ・汚れ点検 | | ✓ | アジャスタフットの緩み・設置状態 | |
| | ✓ | ドアロックユニット作動確認 | | ✓ | キズ・汚れ | |
| | ✓ | ドア緊急時開放スイッチ機構確認 | | ✓ | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと | |
| | ✓ | ドア開放スイッチON時の開放状態 | スペース | ✓ | 装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと | |
| 洗剤ポンプ | ✓ | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付 | 制御 | ✓ | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認 | |
| | ✓ | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ | | ✓ | タッチパネル表示確認・履歴の確認 | |
| | ✓ | 洗剤投入量の確認 | | | ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック) | |
| | ✓ | ローラーポンプの動作確認 | | 有・ 無 | 温水使用切換 | |
| 給排水 | ✓ | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ | 評価 価能 | ✓ | インジケータによる残渣判定(TOSI) | |
| | ✓ | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ) | | ✓ | 周波数と設置ICWの一致 | |
| | ✓ | お湯・水配管(供給状態に問題は無いか、水/湯逆配管NG) | その他 | ✓ | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付 | |
| | ✓ | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響) | | ✓ | 運転・お手入れ方法の説明 | |
| | ✓ | 給湯温度(45~50℃) | | ✓ | 装置内運転時異音・振動 | |
| 電装系 | ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ | 運転 検査 結果 | <input checked="" type="checkbox"/> | 良好 | トシ |
| | ✓ | ディスプレイの色あせ・表示確認 | | <input type="checkbox"/> | 不良 | |
| | ✓ | 電源スイッチの作動状態 | | | | |
| | ✓ | SDカードの挿入・取外性 | | | | |
| | ✓ | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) | | | | |
| | ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ | | | | |

特記事項

| |
|--|
| |
| |
| |
| |