

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書




株式会社IHIパウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

NO. 00000

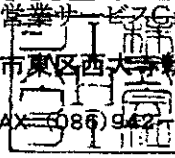

お客様	名称	間瀬デジタルクリニック	製造番号	100210	ご確認	長濱
	住所・TEL	千葉県富津市大堀2-16-10	納入日	2017.4.20		
モリタ・営業所・担当TEL			納入検査・査証・実施者			
担当長濱様 千葉営業所			エム・サービス(株)佐藤 小泉			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他		付属品の確認
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	(良好)		
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量
オリフィス	1個
50HZ付属品	

作業者