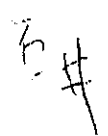


IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ所
作業場所
IHIアグリテック所

お客様	名称	石井歯科クリニック	製造番号	14090205	点検実施日	2020年11月27日	承認印	
	住所	千葉県香取市北1-2-7	通話回線	5/31	点検実施者	エムシーサービス㈱ 佐藤		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署			

計測(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック緩急ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減圧温度センサの汚れ
- ☒ 鋼力ゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水返りコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異音等の確認
- ☒ 真空到達度 リ-テスト-85.6kPa
給水タンク BDテスト-98.4kPa

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準線き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターのみ取り、汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【

運転確認

☒ 是 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-044-8528

FAX:086-042-9030