

保守点検・修理 報告書

発行日： 2021 年 4 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300857
作業年月日	2021 年 4 月 27 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	木下クリニック 様		TEL： 0265-56-2566
所在地	長野県飯田市 4087-6		ご担当 様
販売店	株式会社 ライフ		ご担当 今井 様
納入年月日	平成 28 年 4 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常履歴 ナシ

不具合原因、作業内容

保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 694
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
☐		☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常ありません。使用後のお手入れを丁寧に実施いただきありがとうございます。
 用手洗淨剤『ネオサイム N』で洗浄。

装置情報	交換後運転回数： 349	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒： 707	殺菌/消毒+7L： 1282
	リークチェック： 0	自己洗浄： 1105	7Lコールド： 1	エア単独： 50

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1 set
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	


お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 27 日

ご署名

木下 友順

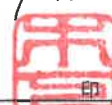

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
 長野県松本市高宮東5-13
 TEL：0263-24-2840

責任技術者

作業者

2021.4.27

2021.4.27

