

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称	横浜フォルテ矯正歯科 様	製造番号	100066	点検実施日	2018年5月17日	横浜フォルテ矯正歯科
	住所	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-1	運転回数	1697	点検実施者	IHIアグリテック 横浜支店	〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当者		電話: 045-620-6552 院長 鈴木 剛史

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置


- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

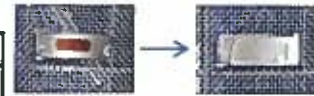

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ DPIチューブ	1
・仕上剤ポンプ DPIチューブ	1
・ドアパッキン一式	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030