


点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018 年 12 月 19 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 11 月 25 日	作業時間：	Hr
顧客名	岡田歯科医院 様	TEL：045-311-5963	
所在地	神奈川県横浜市西区浅間町5-379-5	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 12 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060104	運転回数： 1542
不具合状況、依頼内容、異常履歴 MCサービス修理で・排水センサーブロック交換接続エルボ交換したが水漏れが止まらない		
原因 接続エルボが逆止弁がついていないタイプを誤って取り付け乾燥ファンより大量の水漏れ ※エムシーサービスの作業ミス		
処置、作業内容 水抜きを行いエルボを交換し乾燥させた。		
特記事項 同年に定期メンテナンス及び修理実施済みの為無償		

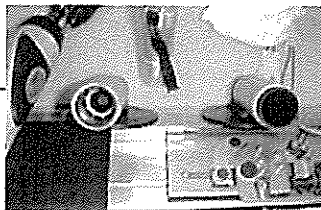

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。 年 月 日 ご署名 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '18/12/19 安田	環PJ '18/12/19 廣瀬