

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号 14-00700 No. 160426

配布先	納入先	新鋭工業（株）名古屋支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	愛知県名古屋市南区菊住2-4-12		機番	000267
環営	ユーザー名	北村病院 様		納入日	平成15年12月26日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年11月25日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成28年4月25日

修理依頼・異常内容

各部点検、内部清掃


不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

性能が劣化した部品を交換して復旧しました。

No1～3：定期交換部品

No4～6：オゾンセンサー、水位センサーほか

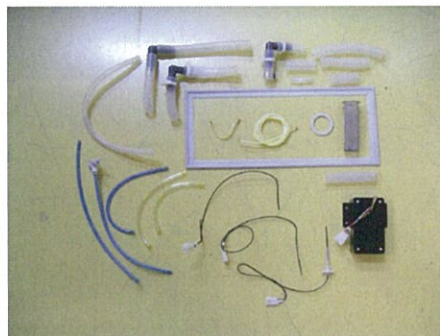

[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。

2. オゾン水濃度測定：0.42～0.54 mg/L・・・正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検

酸素濃度：93.2% 酸素流量：0.79L/min 圧力：0.086～0.163MPa

4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1式	SPS-11971
	吸着筒、吸湿筒、ドレンフィルタ、分解触媒		
4	オゾンセンサー	1個	
5	水位レベルセンサー	3本	
6	配管チューブ、パッキン	1式	水槽フィルタ含む

承認



審査



作成

H28.4.26

中澤