

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様用

お客様 様	名称	左力や歯科 様	製造番号	100224	点検 実施日	2019.4.2	ご承認 印	
	住所	静岡県浜松市中区早通町	運転回数		点検 実施者	川本		
	納入場所	231-2	サービス形態		モリタ 担当			

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☐ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☐ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☐ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水井の作動・漏れ
- ☒ 給湯井の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☐ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ


性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認
☒ 合 ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1セット
プレフィルタ	1
HEPAフィルタ	1
DPI チューブ	2

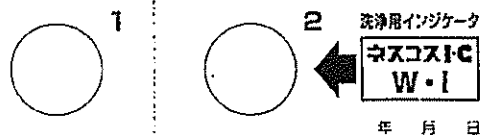

年 月 日

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030