

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号	14-06474	No. 210818
--------	----------	------------

配布先	客先	1	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 殿	機種	OED-1000
	環営	1	顧客名	とよだ青葉クリニック 様	機番	100805
	環品	1	所在地	静岡県磐田市立野508-2	納入日	2013年08月02日
			点検者	中澤 一裕	作業時間	
					受付日	2021年06月29日
	計	3	返送先	納入先と同じ	出荷日	2021年08月02日

運転履歴・不具合内容

タッチパネル故障、保守点検実施

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果

不具合現象を確認いたしました。分解点検したところ「タッチパネル」が故障していました。これらの部品を交換して復旧し、あわせて保守点検を実施しました。

写真1：定期交換部品

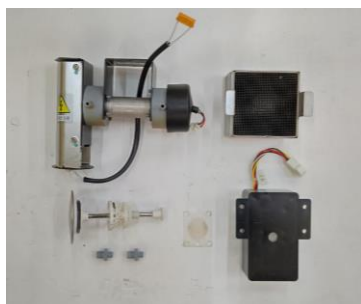


写真2：タッチパネル、コントロール基板、ドレンモータ



[2] 作業内容

- 1：部品交換（下表をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.70ppm・正常
- 3：運転確認・・・正常
- 4：出荷時の装置情報

交換後運転回数：1514→0 殺菌：893、消毒＋アルコール：4924、リークチェック：1
自己洗浄：1134、アルコール単独：1、エア単独：0

承認
松
21.08.19
永
責任技術者
中
21.08.18
澤
作成
R03.8.18
中澤

交換部品			
部品番号	部品名称	数量	備考
	定期交換部品 濃度計、オゾン発生器、分解触媒、フィルタ、排水栓、コネクタ	1式	濃度計 No. 51902106 バルブ：750 LED3.3V
	コントロール基板	1枚	OED-1000S 型 Ver0209/T05C
	タッチパネル	1台	
	ドレンモータ	1台	

（株）IHI物流産業システム（2021年7月1日より社名が変わりました）

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 [TEL:086-944-6528](tel:086-944-6528)

Ver3.1