


作業音用

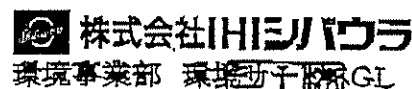

〒704-8122 岡山県岡山市東区瀬田1丁目170番6

TELOBG-944-6528

FAX086-942-9030

ウオッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

お客様	名称	太田川駅前 デニタルクリニック	製造番号	14070129	ハコ 確認	張
	住所	群馬県太田市太田駅前うすハ太田下	納入検査実施日	2015年3月14日		
	納入場所		納入検査・金庫・実証書	EMシーアール(株) 名古屋SC 西澤		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・経ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残量判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

[illegible]