

2017年2月3日

点検・修理報告書

装置の点検・修理につきまして下記にご報告いたします。


顧 客 名	木村歯科クリニック 様	機 種	WD-150
住 所	兵庫県三木市別所町高木894-1	機 番	No. 14080162
代理店名	株式会社モリタ神戸営業所	納 入 日	2015年6月
作 業 者	(株)IHIシバウラ 環境サービスグループ 小山		

[1] 障害状況

- ・エラー「8」スタートボタンを押しても運転開始しない。
- ・排水フィルタに黒いカスが溜まっている。

[2] 原因

- ・循環ポンプのケーシングが膨潤し樹脂が剥がれ循環ポンプが作動せず水が流れない状態になっていました。

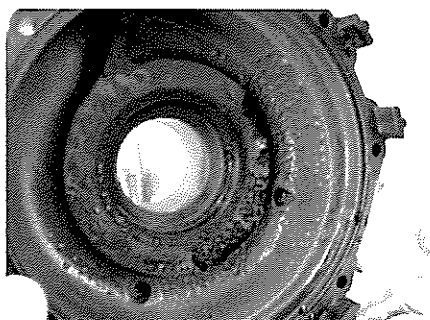

[3] 修理内容

- ・メタルメッキコーティングを実施した循環ポンプに交換しました。
- ・消毒工程時の仕上剤投入量を30ml→20mlへ変更。
- ・消毒工程時の仕上剤投入時間を120秒へ変更しました。

[4] 備考

- ・装置の清掃、点検を行いました。

 株式会社IHIシバウラ
営業部 サービスグループ
岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030