

小型 全自動洗浄消毒装置 WD-150点検表

お客様	名称	河上歯科医院 様	製造番号	14080155	点検実施日	2015/8/4	承認印	
	住所	広島県尾道市西則末町 8-20	運転時間	896 時間	点検実施者	小野		
	納入場所		サービス形態	定期1	モリタ担当部署	広島		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバック目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品


- ☒ ドアバックの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)



検査前

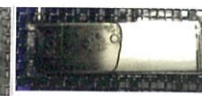

検査後

運転確認

143

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
洗剤ポンプ	2
エアフィルター(プレ) (2ヶ-10分)	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業センター
〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX 086-942-9030

クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名称	河上歯科医院 様	製造番号	1310053	点検実施日	2015/8/4	ご承認印
	住所	広島県尾道市西則末町 8-20	運転時間	1079/9 時間	点検実施者	小野	
	納入場所		サービス形態	定期1	モリタ担当部署	広島	

計装(安全)

☒	圧力計0点指示誤差
ドア	
☒	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
☒	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
☒	フック取付け状態・動作確認
☒	フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
☒	ビス・ナット・ホーローセット増し締め
☒	ドアカバーの取り付け状態・割れ
☒	フック検出ユニット作動確認
☒	ドアロックユニット作動確認
☒	蓋板のキズ・汚れ

缶体

☒	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
☒	滅菌温度センサの汚れ
☒	網カゴの破損・汚れ
☒	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

☒	フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
☒	シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
☒	給気弁の作動状態・漏れ
☒	排蒸弁の作動状態・漏れ
☒	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
☒	滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
☒	ストレーナーの汚れ
☒	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
☒	安全弁(滅菌室)の漏れ
☒	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
☒	ダンブナーの漏れ・溶接割れ
☒	大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
☒	ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒	ソケット他溶接割れ・漏れ
☒	フランジパッキン漏れ
☒	ヒーター取り付け状態・漏れ
☒	空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
☒	電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
☒	逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☒	水漏れ・異常音の確認
☒	真空到達度

給水タンク

☒	給水タンクの損傷・漏れ
☒	下部給水弁の漏れ
☒	蓋・取っ手の損傷・割れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

☒	タンクの汚れ・漏れ
☒	フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

☒	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
☒	ディスプレイの色あせ・表示確認
☒	電源スイッチの作動状態
☒	行程表示LEDの点灯
☒	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
☒	各基板のコネクター緩み確認
☒	端子の緩み・コネクターの接続確認
☒	配線の変色・損傷有無・結束状態
☒	圧力センサーの取付け状態・入力確認
☒	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

☒	本体の水平確認・基準傾き内
☒	アジャスタフットの緩み・設置状態
☒	キズ・汚れ
☒	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒	運転プログラムの確認
☒	入力・出力確認
☒	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

☒	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
☒	エアフィルター・つまり・汚れ

性能評価

☒	B&Dテスト実施
☐	ケミカルインジケータによる判定
☐	リークチェック
☐	キャリブレーションの実施(温度・圧力)



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

運転確認
合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン 1年目はしない。(初回実施)	1
エアフィルター	1
給水タンク 71115-1101	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービスG
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6628 FAX 086-942-9030