

IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
別添付リテック用

お客様 様	名称	梅ヶ丘病院歯科	製造番号	14080167	点検 実施日	2019年9月13日	ご承認 印	モリタ 9月14日
	住所	広島県大竹市坂波5-2-1	運転回数	643	点検 実施者	エムシーサービス御西村		
	納入場所		サービス形態	ベシツサポートプラン	モリタ 担当部署	広島支店		

ドア機構

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバック目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ動作確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの動作確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの動作状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の動作状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の動作状態・漏れ
- ☒ RO水弁の動作状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の動作状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの動作状態・異音
- ☒ 防護ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの動作状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止線の取り付け状態・汚れ

電線系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアバックの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
☒	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
DPIチューブASSY	2
扉バックシン上	1
扉バックシン下	1
HEPAフィルター	1
入口フィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

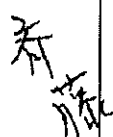
TEL:086-944-8528

FAX:086-942-9030

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

電リテック
作風専用
IHIアグリテック用

お客様 情報	名称	梅ヶ丘病院歯科	装置番号	14090209	点検実施日	2019年9月13日	ご承認 印	
	住所	広島県大竹市秋波5-2-1	運転時間	1113	点検実施者	エムシーサービス勝西利		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ支店	広島支店		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示調整
- ドア
- ☒ フック抽出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックバネ・フック継ぎ目の取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック抽出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 減圧温度センサの汚れ
- ☒ 鋼カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ
- 配管系
- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 減圧弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(減圧室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ リケット溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆立弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電統系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電氣スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター端子確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の变色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・变色有無(ボイラー・乾燥)

外観・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターの変更・汚れ

性能評価

- ☒ 8&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【

運転確認
☒ 合格

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-0030