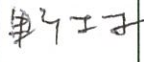


クラスB オートクレープ BC-17点検表

お客様	名称	はらまち歯科クリニック 様	製造番号	13090015	点検実施	2017年3月23日	ご承認印	
	住所	北九州市小倉北区原町2-6-14	運転時間	1985	点検実施	エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア**
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット作動確認
- ☒ ドアロックユニット作動確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☐
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

運転確認

良好

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
エアーフィルター	1



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部営業部 営業サービスG
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528 FAX086-942-9030