

株式会社IHインバウ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave・IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ福岡支店	担当者名	三留 様
ユーザー名	ひでふみデンタルクリニック	お客様担当者	
納品年月日	2015/9/17	機種名/機番	IC W/100013
発生年月日	10月16日	発生場所	長崎県西彼杵郡長与町高田郷951

不具合内容

納入から1ヶ月で扉の両端から水が漏れ出したとの事。
昨日の水漏れより、さらに水漏れの量が多くなり、排水異常が出た

モリタ福岡 三留様にてモリタ福岡支店ショールームの展示器との入替えにて対応。
引き上げた装置を車に積もうとしたところ、装置より大量の水が出てきた。

回 答

【記入欄】

装置内部の底板に水がたまり、漏洩センサーが検知し、停止したと思われる。
原因は排水時、排水口より水が下にたれ、温水側の給水口の隙間(写真1)より水が装置内部に侵入し(写真2)、繰り返し運転で大量の水がたまっただためである。
排水口からの水漏れが問題であるため、ラッパ付きの排水ホースを採用し、水漏れを止める。(51号機より同梱)

写真1

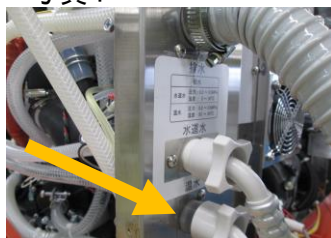


写真2

