



株式会社IHIシバウラ

環境事業部

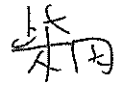
環境サービス部GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区巨田寺町10番6

TEL086-944-16528

FAX086-942-9030

IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称	原田歯科医院 様	製造番号	100122	ご確認	
	住所	福岡県大牟田市唐船152-1	納入検査実施日	2016年8月24日		
	納入場所	同上	納入検査実施者	株式会社IHIシバウラ 富田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無			✓
	レ	滅菌温度センサの汚れ			
	レ	網カゴ、破損汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	レ	給水タンクの損傷・漏れ		✓	キズ・汚れ
	レ	下部給水弁の漏れ	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	レ	蓋・取っ手の損傷・割れ	制御	レ	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		レ	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	レ	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
BMS-Test STEAM			その他		付属品の確認
異常なし					運転説明
✓				✓	装置内運転時異音

備考			