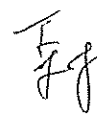


株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	製造番号	ご確認	
	さこ歯科	100477		
	住所	納入検査実施日		
	鹿児島市中央町19-40 6F	2021. 4. 10		
		納入検査実施者		
		エムシーサービス(株) 黒木		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・バツキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項

旧 洗浄室のオートクレーブです