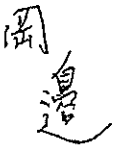


IM-302

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

※リタ用
作業書用
IHアグリテック用

お客様 様	名称	いなみ矯正歯科医院 様	製造番号	100/65	点検 実施日	2018年7月26日	ご承認印 
	住所	京都府宇治市広野町東裏62-1	運転回数	1076	点検 実施者	エムシーサービス(株)京都 近辺 勝 好	
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	リタ 担当者	秋田 様	

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・経年劣化の汚れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり・清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
(合)	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
洗剤・仕上剤ポンプチューブ	2
ドアパッキン(上)	1
ドアパッキン(下)	1
HEPAフィルタ	1
プレフィルタ	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030