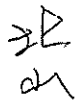


クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	大阪歯科大学附属病院(8F)	製造番号	100011	点検実施日	2020年11月20日	ご承認印	
	住所	大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 8F	運転回数	2157	点検実施者	IAT 三宅		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者			

計装(安全)

☒ 圧力計ゼロ設定

ドア

- ☒ ブラケットの溶接状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内蓋のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 缶内温度センサの汚れ
- ☒ トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損、汚れ
- ☒ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

- ☒ テフロンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ☒ 給気弁の動作確認
- ☒ 排蒸弁の動作確認
- ☒ 真空・排気弁の動作確認
- ☒ 蒸気弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 回水弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 排水コネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(缶内)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブの折れ、裂けの確認
- ☒ 蓋の損傷・割れ
- ☒ フLOATセンサー(L)の作動確認
- ☒ フLOATセンサー(H)の作動確認

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フLOATスイッチの作動確認

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態
- ☒ SD基板の腐食の確認

外装・設置

- ☒ 設置場所の水平確認
- ☒ 本体のフロント側が高いことの確認
- ☒ アジャスタの緩み・破損の確認
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- ☒ SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターつまり、汚れ ※(使用回数 回)

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ コンパクトPCDによる判定
- ☒ TESTバキューム
- ☒ 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認	
合	否

インジケータ貼り付け

【 】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030